

TSG101 蛋白对照

产品名称： TSG101 蛋白对照品

产品货号： UR22001

产品浓度： 1 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$

包装规格： 200 $\mu\text{L}/\text{Tube}$

保存条件： $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，避免反复冻融

保存时间： 12 个月

产品应用： SDS-PAGE Western blot 检测实验


产品描述：

本产品来源人 Hela 细胞，经强 RIPA 裂解液（含 1mM PMSF）裂解，用离心法除去细胞碎片及其他杂质，BCA 法测定总蛋白浓度，加入 SDS-PAGE Loading Buffer 煮沸 10 分钟。

使用说明：

- 室温下解冻后轻轻混匀或者用移液枪缓慢吹打混匀，不要煮沸；
- 取本产品 10 μg 与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE），建议初次使用此产品时可根据自身的实验条件通过预实验确定合适的上样量以获得效果更佳的结果；
- 未使用完的产品保存于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 条件下。仅限科研使用！

产品测试：

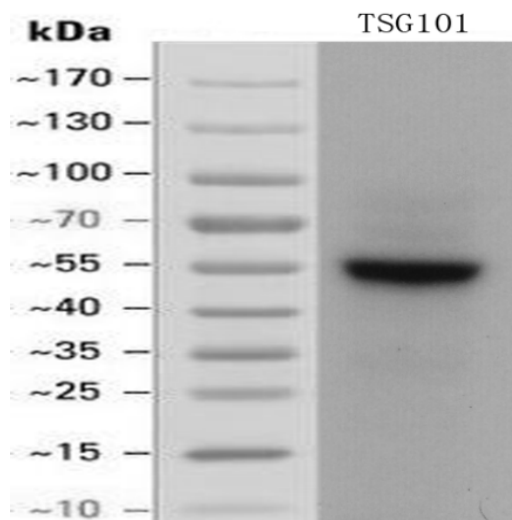

SDS-PAGE 胶： 10%分离胶

样品上样量： 10 μg

一抗：

TSG101, abcam ab83, 1:500 稀释；

4 $^{\circ}\text{C}$ 孵育过夜

二抗：

mouse IgG, arigo ARG65350, 1:10000 稀释；

室温孵育 50min

曝光时间： 5S

