

## CD63 & TSG101 蛋白对照品

**产品名称：**CD63 & TSG101 蛋白对照品

**产品货号：**UR22006

**产品浓度：**1  $\mu\text{g}/\mu\text{L}$

**包装规格：**200  $\mu\text{L}/\text{Tube}$

**保存条件：**-20  $^{\circ}\text{C}$ ，避免反复冻融

**保存时间：**12 个月

**产品应用：**SDS-PAGE Western blot 检测实验


### 产品描述：

本产品来源 MHCC-97H 细胞，经强 RIPA 裂解液（含 1mM PMSF）裂解，用离心法除去细胞碎片及其他杂质，BCA 法测定总蛋白浓度，加入 SDS-PAGE Loading Buffer 煮沸 10 分钟。

### 使用说明：

- 室温下解冻后轻轻混匀或者用移液枪缓慢吹打混匀，不要煮沸；
- 取本产品 10  $\mu\text{g}$  与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)，建议初次使用此产品时，可根据自身的实验条件，通过预实验确定合适的上样量以获得效果更佳实验结果；
- 未使用完的产品保存于-20 $^{\circ}\text{C}$ 条件下。**仅限科研使用！**

### 产品测试：

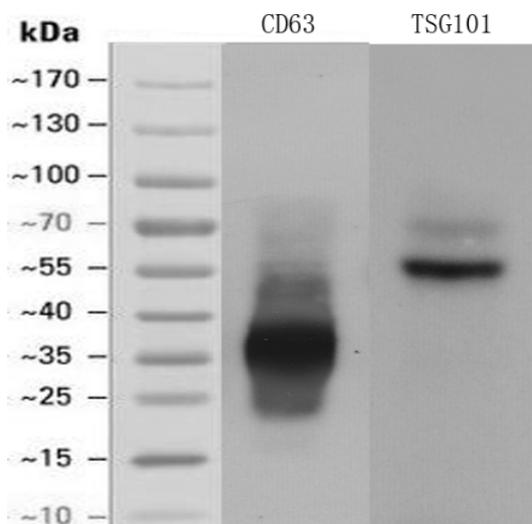

**SDS-PAGE 胶：**10%分离胶

**样品上样量：**10  $\mu\text{g}$

**一抗：**

CD63, abcam ab193349, 1:1000 稀释；

TSG101, abcam ab83, 1:500 稀释；

4 $^{\circ}\text{C}$ 孵育过夜

**二抗：**

mouse IgG, arigo ARG65350,

1:10000 稀释，室温孵育 50min

**曝光时间：**5S

